

ENDOCART

Solution de transport pour tous les types
d'endoscopes flexibles






UNE SOLUTION DE TRANSPORT

SOLUTION GLOBALE

Un endoscope propre et désinfecté est indispensable pour garantir la sécurité de chaque patient et de chaque procédure. Le transport sécurisé de l'endoscope flexible désinfecté jusqu'au patient suivant est tout aussi essentiel dans le cycle de traitement que le nettoyage et la désinfection de l'endoscope flexible proprement dit. Pour cette raison, nous offrons une gamme complète de systèmes, de consommables et de services couvrant tous les aspects du cycle de traitement de l'endoscope: la solution globale.

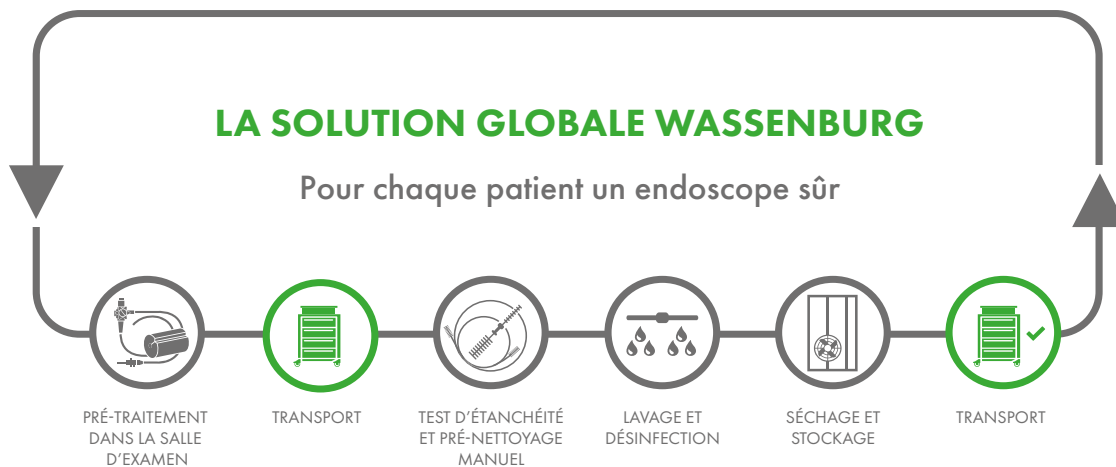

AVANTAGES DE L'ENDOCART

- Protection des équipements couteux pendant le transport
- Réduction du risque de contamination croisée
- Protection du personnel médical contre les risques microbiologiques
- Amélioration du flux de travail lors des opérations quotidiennes
- Utilisation facile, identification du statut en un clin d'œil
- Facile à nettoyer, maintenance aisée





- La surface lisse du bac facilite le nettoyage et la désinfection
- Le dessus du chariot fournit un espace de travail supplémentaire dans les zones plus étroites (p. ex. au chevet du patient)
- Le bac est dépourvu de toute zone non accessible pour un nettoyage et une désinfection optimaux
- La taille du bac permet d'éviter tout enroulement de l'endoscope
- Les bacs et la partie supérieure sont résistants à la chaleur jusqu'à 93 °C, ce qui entraîne un niveau de traitement A0 600 selon ISO 15883 partie 1



- Partie supérieure amovible pour un nettoyage et une désinfection aisés
- 6 bacs pour le transport de plusieurs endoscopes désinfectés vers le patient suivant
- Cadre en acier inoxydable
- Poignée ergonomique garantissant une prise en main ferme lors de la poussée du chariot
- Une gamme de trois housses différentes (stériles/non stériles) conçues pour l'EndoCart protégera l'endoscope désinfecté pendant le transport.
- Facile à manœuvrer grâce à ses quatre roulettes pivotantes
- Équipé de freins pour améliorer la stabilité

RÉFÉRENCES COMMANDE

Numéro d'article 952535 Wassenburg EndoCart

Numéro d'article 952536 EndoCart Bac

Numéro d'article 952865 Housses EndoCart

Numéro d'article 953484 Housses du bac Wassenburg

Numéro d'article 953485 Housses du bac Wassenburg - non stérile

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

EndoCart

Le Wassenburg EndoCart est conçu pour protéger les endoscopes flexibles des contaminants présents dans l'air et de tout dégât survenant lors du transport entre la salle d'examen et la salle de traitement. La constitution robuste mais élégante de l'EndoCart combinée aux quatre roulettes pivotantes permettent de manœuvrer aisément dans les zones exigües.

Dimensions du chariot	510 x 690 x 1050 mm
Capacité	de 6 bacs
Poids (vide)	23 kg
Poids (avec bacs)	31 kg

Bac et housse

L'ensemble housse est constitué de deux housses exempts de latex: une housse de base brevetée à placer dans le bac EndoCart, sur lequel est posée l'endoscope désinfecté lors du transport, et une housse dotée d'une identification visuelle à code couleur transparent pour couvrir le bac afin d'offrir un environnement protecteur, tant aux patients qu'au personnel médical. La taille du bac permet d'éviter tout entortillement des endoscopes et tout choc physique pour ceux-ci. Le bac ne présente aucune partie de rebord susceptible d'interférer avec un nettoyage efficace. La housse EndoCart a des ouvertures pour fixer la housse au bac tandis que la housse du bac Wassenburg se replie autour des bords du plateau.

Dimensions du bac	430 x 550 x 100 mm
Capacité	d'un endoscope
Poids (vide)	1.3 kg
Housses EndoCart	200 éléments (4 X 50 par boîte)
Housses du bac Wassenburg	200 éléments (4 X 50 par boîte)
Housses du bac Wassenburg - non stérile	300 éléments (par boîte)



Wassenburg Belgium bvba
Boomsesteenweg 77a
2630 AARTSELAAR
BELGIUM

T: +32 (0)3 747 04 33
F: +32 (0)3 747 04 36
info@wassenburgmedical.be
www.wassenburgmedical.be

Wassenburg Medical, membre de Hoya Corporation, est une société d'envergure internationale spécialisée dans le développement et la fabrication de produits et services innovants visant à optimiser le processus de traitement des endoscopes. Nous élargissons en permanence notre portefeuille d'activités et de services et disposons d'un réseau de distribution international hautement expérimenté. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez consulter notre site Web.

© Copyright 2019. Sous réserve de modifications.