

Spécialistes dans le retraitement d'endoscopes depuis plus de 35 ans!




# WASSENBURG® WD4200

La solution intelligente pour le retraitement des endoscopes

## UN ENDOSCOPE SÛR POUR CHAQUE PATIENT

Wassenburg Medical est un leader dans le retraitement des endoscopes. Depuis plus de 35 ans, nous développons des solutions innovantes avec pour seul objectif de fournir un endoscope sûr à chaque patient. Le résultat est une gamme de produits et de solutions qui couvrent le spectre complet du retraitement des endoscopes: une solution intégrale.

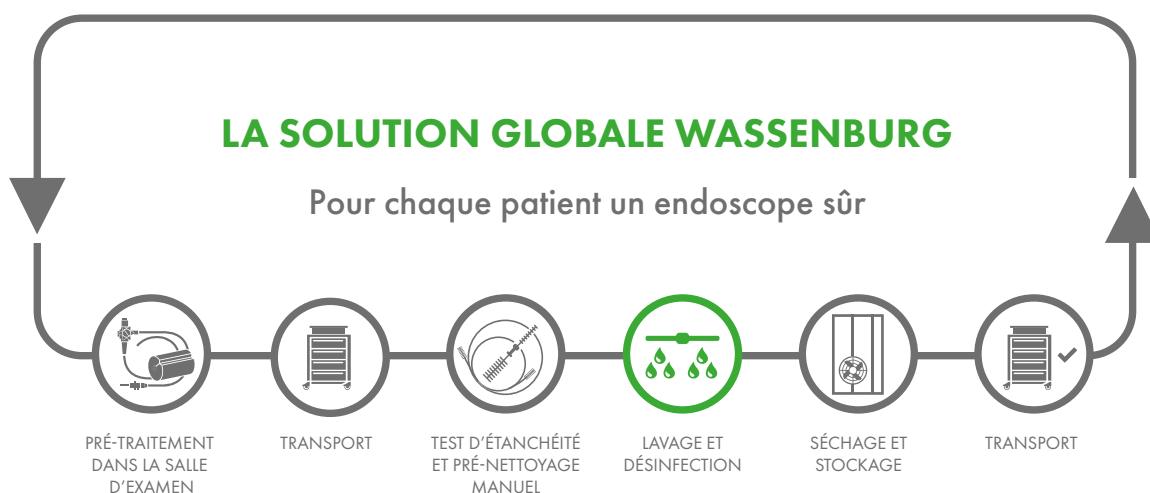

Le WD4200 de WASSENBURG® est un laveur-désinfecteur d'endoscopes monocuve doté d'une technologie intelligente qui assure un nettoyage et une désinfection contrôlés et efficaces des endoscopes flexibles. Grâce à sa conception compacte et à sa facilité d'utilisation, le WD4200 de WASSENBURG® est un atout précieux pour les services l'endoscopie.

## UN NETTOYAGE ET UNE DÉSINFECTION CONTRÔLÉS

Le WASSENBURG® WD4200 permet à toutes les parties de l'endoscope d'entrer au maximum en contact avec les produits chimiques du processus et d'immerger complètement le tube d'insertion de l'endoscope pour un nettoyage et une désinfection optimaux. Le système intelligent de contrôle du débit des fluides surveille tous les canaux individuels et interconnectés de l'endoscope pour surveiller les connexions, le débit, la pression et les obstructions.

EndoXpert surveille non seulement les canaux, mais également l'état de l'endoscope lui-même. La technologie intelligente intégrée d'EndoXpert fournit des informations sur l'état de chaque endoscope pour une sécurité optimale.



EndoXpert est une technologie intelligente qui fournit à l'utilisateur des informations en temps utile pour permettre un flux de travail fluide. En outre, EndoXpert surveille l'état de l'endoscope, si bien que l'utilisateur bénéficie de toute l'aide nécessaire pour mettre un endoscope sûr à la disposition du patient suivant.

— ENDOXPERT —

## UN FLUX DE TRAVAIL FLUIDE GRÂCE À ENDOXPERT

Grâce à la technologie intelligente intégrée d'EndoXpert, le WD4200 de WASSENBURG® fournit des informations essentielles à l'opérateur afin de minimiser les interruptions ou les temps d'arrêt pendant le retraitement:

- Signaux préventifs concernant l'état des produits chimiques de procédé EndoHigh®, le filtre bactérien EndoCap, et le moment où un intervalle de maintenance doit être programmé.
- Gain de temps grâce à la possibilité de préprogrammer l'autodésinfection en dehors des heures de fonctionnement.
- Intervention minimale de l'utilisateur au cours d'un processus grâce à un traitement intelligent des erreurs.

## CONVIVIALITÉ

Grâce à sa conception axée sur l'utilisateur, le WD4200 de WASSENBURG® permet à l'utilisateur d'accéder facilement au chargement et au déchargement des endoscopes. La cuve spacieuse permet une vue dégagée sur l'endoscope et est conçue pour le raccordement d'endoscopes plus grand avec 8 canaux contrôlés.

L'interface utilisateur intégrée du WD4200 permet une utilisation intuitive et facile. Le matériel de raccordement convivial à codage couleur et la routine de chargement sans contact aident l'utilisateur à exécuter un cycle de processus rapide et sûr.





## UN PROCESSUS SÛR ET TRAÇABLE

La traçabilité est essentielle pour gérer et contrôler l'opération de retraitement de l'endoscope et garantit le respect des réglementations. Avec WASENBURG® Process Reporter, toutes les étapes du processus de nettoyage et de désinfection du WASENBURG® WD4200 sont suivies et surveillées en détail.

Dans un aperçu central, Process Reporter fournit des informations numériques sur les opérations quotidiennes du laveur-désinfecteur.

## CONÇU POUR L'EFFICACITÉ

Grâce à sa conception compacte, le WD4200 de WASENBURG® offre une flexibilité pour les hôpitaux de toutes tailles, et est facilement évolutif pour étendre sa capacité. Le WD4200 de WASENBURG® est une solution efficace, permettant un débit élevé de 3 endoscopes par heure.

Nos produits chimiques de procédé EndoHigh®, composés d'un détergent combiné à un désinfectant à base d'acide peracétique (PAA), ont été exclusivement développés pour les laveurs-désinfecteurs d'endoscopes WASENBURG® afin d'offrir une performance de traitement excellente et sûre.



## SPÉCIFICATIONS DU WD4200 DE WASSENBURG®

|                                 |                                                                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions                      | L. 525 mm<br>P. 770 mm, 920 mm y compris le cache arrière optionnel<br>H. 1262 mm couvercle fermé, 1620 mm couvercle ouvert |
| Poids                           | Environ 125 kg (non chargé)                                                                                                 |
| Alimentation électrique         | 230 V, 50Hz / 60 Hz                                                                                                         |
| Pression min/max                | 2.5 / 4 bar                                                                                                                 |
| Débit min d'alimentation en eau | 6 l/min                                                                                                                     |
| Consommation d'eau              | Environ 18 l/cycle                                                                                                          |
| Qualité de l'eau                | Potable                                                                                                                     |



### CONÇU POUR LA CONFORMITÉ

- ISO 15883-1 et ISO 15883-4
- EN1717:2000: prévention des reflux d'eau



Wassenburg Belgium bvba  
Boomsesteenweg 77a  
2630 AARTSELAAR  
BELGIQUE

T: +32 (0)3 747 04 33  
F: +32 (0)3 747 04 36  
[info@wassenburgmedical.be](mailto:info@wassenburgmedical.be)  
[www.wassenburgmedical.be](http://www.wassenburgmedical.be)