

Kompetenz ist unsere Stärke! seit 1984! Tradition in der Aufbereitung von flexiblen Endoskopen.




WASSENBURG® DRY320

Trocknungs- und Lagerschrank

Eine Revolution in der Ergonomie

EIN SICHERES ENDOSKOP FÜR JEDEN PATIENTEN

Wassenburg Medical ist führend auf dem Gebiet der Endoskopaufbereitung. Seit mehr als 35 Jahren entwickeln wir innovative Lösungen mit einem Ziel: ein sicheres Endoskop für jeden Patienten bereitzustellen. Das Ergebnis ist ein Angebot von Produkten und Lösungen für das gesamte Spektrum der Endoskopaufbereitung – eine absolut umfassende Lösung.

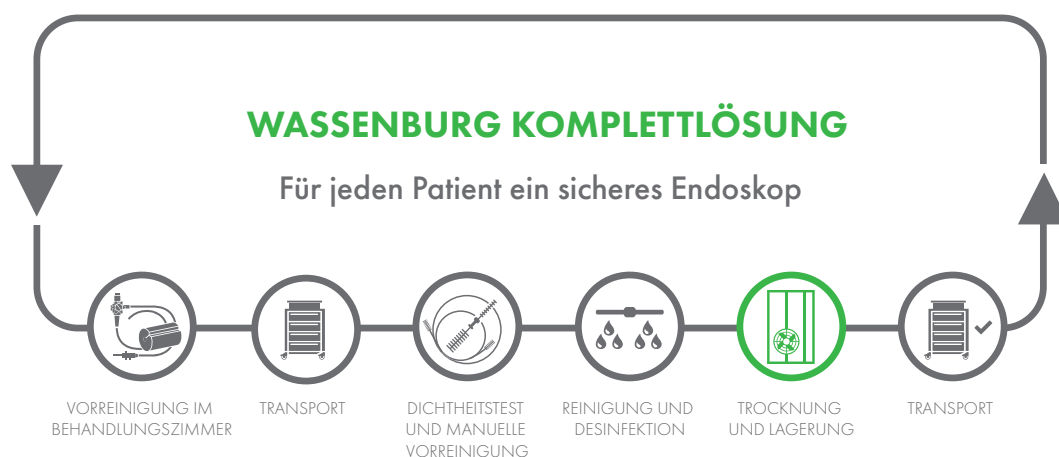

Der WASSENBURG® DRY320 ist konzipiert, um zu einer sicheren und kontrollierten Behandlung mit flexiblen Endoskopen beizutragen. Ein patentiertes Trockensystem, das für ergonomisches Arbeiten, optimale Endoskop-Positionierung und bewährte Trocknungseffizienz entwickelt wurde.



ERFÜLLT DIE NORM DIN EN ISO 16442

Der WASSENBURG® DRY320 Trocknungs- und Lagerschrank erfüllt die Anforderungen der Norm DIN EN ISO 16442 und wird nach DIN EN ISO 13485 entwickelt und hergestellt. WASSENBURG® DRY320 bietet den höchsten Standard in Schutz und Hygiene des Endoskops nach dem Reinigungs- und Desinfektionsprozess.

OPTIMALER TROCKNUNGSPROZESS

Die Endoskope werden in unseren Trockenschränken vertikal getrocknet gelagert, so dass die Schwerkraft den Trocknungsprozess erleichtert. Vertikales trocknen wird in den Richtlinien der Endoskop-Hersteller empfohlen und entspricht den Empfehlungen der ESGE-ESGENA- Richtlinie 939.

Die kontrollierte Umgebung sorgt dafür, dass sich die mikrobiologische Qualität des Endoskops nicht verschlechtert und die Bildung von Biofilmen verhindert wird.

LANGZEITLAGERUNG

Unsere Trockenschränke garantieren eine kontrollierte und sichere Lagerung, die den gewaschenen und desinfizierten Zustand des Endoskops für bis zu 30 Tage bewahrt.*

Die Langzeitlagerdauer in einer kontrollierten Umgebung ermöglicht mehr Effizienz innerhalb der Abteilung, indem Endoskope immer rechtzeitig zugänglich sind, wenn Sie benötigt werden. Der regelmäßige Luftstrom in und um das Endoskop während der gesamten Dauer der Lagerung bewahrt den desinfizierten Zustand.



* Konsultieren Sie die örtlichen Richtlinien

HERVORRAGENDE ERGONOMIE

Der WASSENBURG® DRY320 bietet ein einzigartiges und patentiertes Pull-down-Positionierungssystem. Dieses revolutionäre Design ermöglicht Benutzern unabhängig von ihrer Körpergröße komfortables Beladen, Anschließen und Entnehmen der Endoskope aus dem Schrank.

Die Endoskop-Halterungen werden ganz einfach auf eine für den Anwender bequeme Höhe herangezogen. LED-Anzeigen, die in die Endoskop-Halterungen integriert sind, verdeutlichen auf einen Blick, in welchem Aufbereitungsstatus sich das jeweilige Endoskop gerade befindet.

HOHE BELASTBARKEIT

Das robuste Design ermöglicht eine solide Positionierung jedes Endoskops in den Halterungen. Jedes Endoskop wird individuell angeschlossen, um durch die Verwendung gefilterter Druckluft einen optimalen Luftstrom durch die Kanäle zu gewährleisten.

VOLLSTÄNDIGE RÜCKVERFOLGBARKEIT & DOKUMENTATION

Unsere Lösungen sind so konzipiert, dass sie zu einer sicheren und vollständig kontrollierten Aufbereitung von flexiblen Endoskopen beitragen. Die Rückverfolgbarkeit ist der Kern Ihres Betriebs und wichtig für die Einhaltung von Richtlinien. Die integrierte Rückverfolgbarkeit unterstützt den Anwender bei der Einhaltung der geltenden Qualitätssysteme.

Alle Schritte des Trocknungsprozesses werden detailliert verfolgt und überwacht. Ein Bericht wird an einen integrierten Drucker oder optional an unsere spezielle WASSENBURG® Prozessmanager-Software gesendet. Die Prozessdaten werden gesammelt und liefern aussagekräftige Informationen zu allen Prozessen, die im WASSENBURG® DRY320 stattfinden.

Um Vorschriften einzuhalten, arbeitet der Prozessmanager nahtlos mit dem WASSENBURG® DRY320 zusammen. Dabei bietet er wertvolle Einblicke in Ihren täglichen Betrieb. Zusätzlich hilft er Ihnen, die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit Ihrer Endoskope zu verbessern.



SPEZIFIKATIONEN WASSENBURG® DRY320

Maße	B. 1300 mm T. 453 mm H. 2074 mm
Gewicht	+/- 245 kg (entladen)
Leistungsbedarf	230 VAC; 50/60 Hz; 2.2A
Elektrischer Anschluss	Stecker mit Erdungsanschluss
Anzahl der Positionen	10
Platz pro Endoskop	99 mm
Trocknungszeit	90 Minuten
Lagerzeit	30 Tage
Umgebungstemperatur	18°C - 35°C
Druck	2 – 8 bar
Maximaler Verbrauch	100L/Min
HEPA filter	H13
HEPA-Filterwiderstand	250 Pa



ENTWICKELT MIT KONFORMITÄTEN

- ISO 13485
- EN 16442



Wassenburg Deutschland GmbH
Krefelder Str. 350
41066 MÖNCHENGLADBACH
DEUTSCHLAND
info@wassenburgmedical.de
www.wassenburgmedical.de

Verkauf Kundendienst
T: +49 (0)2161-94990-11
Technischer Kundendienst
T: +49 (0)2161-94990-10
Technische Hotline
T: +49 (0)2161-94990-04

© Copyright 2024. Änderungen vorbehalten.