

WASSENBURG® WD440

Reinigungs- und Desinfektionsgerät
Endoskopie



- + **NEU LED-Prozessidentifikation**
Klare Prozessidentifikation durch farbliche LED-Technologie der Einzelkammern
- + **NEU Intuitiver Farb-Touchscreen**
Benutzerfreundlich: schnelle, sichere und einfache Bedienung
- + **NEU Ergonomie auf hohem Niveau**
Hygienisches Öffnen mit einer einzigen Berührung des Fußsensors
- + **Hohe Kapazität**
Zweikammer-System für die separate und unabhängige Aufbereitung von zwei Endoskopen und dadurch optimale effektive Auslastung
- + **Eindeutige Kontrolle**
Weltweit führende Technologie von Wassenburg: Einzelkanal-Ansteuerung und Kanaltrennung
- + **Optimale Sicherheit**
Unabhängiges Überwachungssystem (IMS – Independent Monitoring System) für eine sichere Überwachung und unabhängige Messung der relevanten Prozessparameter

OPTIMALE KONTROLLE

- + Kanaltrennung
- + Durchfluss- und Druckkontrolle
- + Kanalanschluss-Kontrolle
- + Independent Monitoring System (IMS)

- + Permanente Dichtheits-Kontrolle
- + Blockade-Kontrolle
- + Lückenlose Nachverfolgbarkeit mittels Process Manager (und Möglichkeit zum Upload zu Programmen von Krankenhausinformationssystemen)

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Breite x Tiefe x Höhe: 941 x 750 x 1033 mm (1580 mm bei geöffnetem Deckel)
 Leergewicht (ca.): 200 kg
 Kammergröße ca.: 6 l (pro Seite)

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS


Spannung: 230 V (Frequenz 50 Hz)
 Art des elektrischen Anschlusses: Stecker mit Erdungsverbindung
 Maximale Stromstärke: 13 A
 Maximale Leistungsaufnahme: 3300 W
 Durchschnittliche Wärmeübertragung ca.: 400 W pro Kammer

WASSERZU- UND ABLAUF

Min./max. Druck: 2,5/4 Bar (max. Differenz zwischen Heiß- und Kaltwasserzufuhr: 1 Bar)
 Minimale Durchflussmenge für Heiß-/Kaltwasserzulauf: 10 l/Min. (Ablaufkapazität: 20 l/Min. pro Abfluss)
 Abfluss: Zwei Abflüsse und zwei Überläufe, beide Überlaufschläuche werden in einem Abfluss gemeinsam genutzt (Durchmesser pro Abfluss: > DN40)
 Abflusshöhe: 530 mm (+/- 5 mm)
 Wasserhärte: max. 5°dH oder vollentsalztes Wasser

ABLUFTANLAGE

Kapazität: 70m³/h
 Durchmesser: DN 50
 Parameter: kondensatfreie Abluft

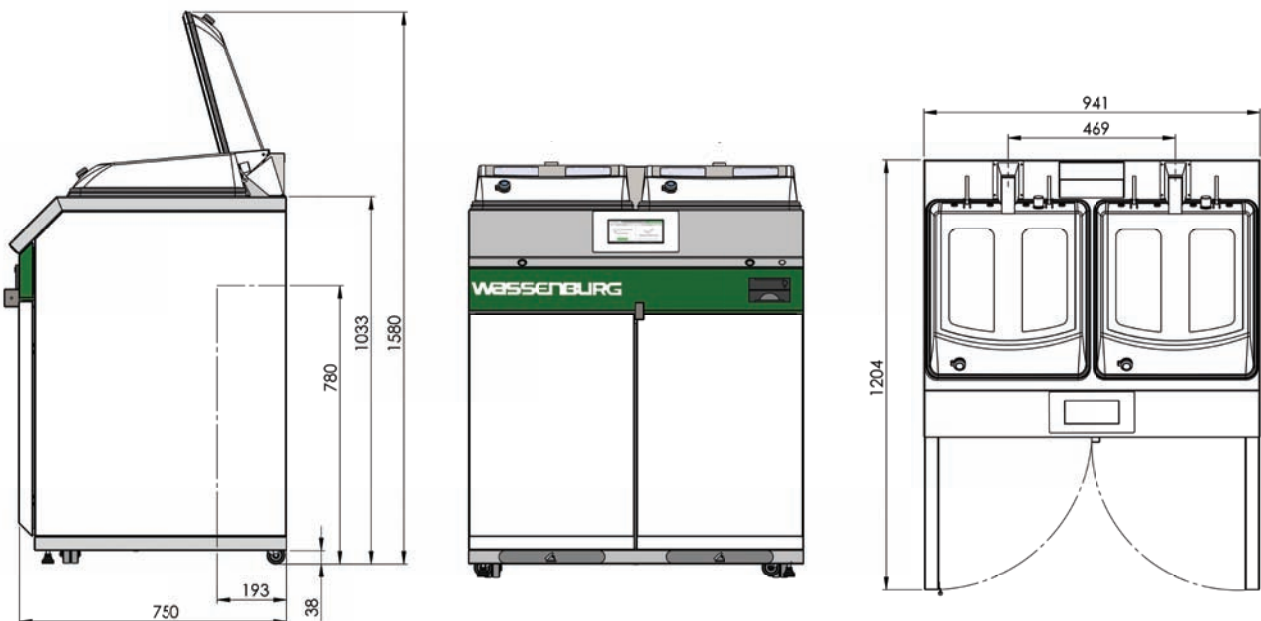

Das Modell WASSENBURG® WD440 verfügt über das CE-Zeichen und entspricht vollständig EN ISO 15883 Teil 1 und 4.
 © Copyright 2016. Änderungen vorbehalten.

Wassenburg Deutschland GmbH
 Krefelder Str. 350
 41066 Mönchengladbach

Tel.: +49 (0)2161 / 94990-11
 Fax: +49 (0)2161 / 94990-33
 E-Mail: info@wassenburgmedical.de
www.wassenburgmedical.com