

**SEIT MEHR ALS 30 JAHREN SPEZIALISIERT
IN DER AUFBEREITUNG VON ENDOSKOPEN!**

WASSENBURG® WD440 PT

Durchlade-Reinigungs- und Desinfektionsgerät Endoskopie



- + **NEU LED-Prozessidentifikation**
Klare Prozessidentifikation durch farbliche LED-Technologie der Einzelkammern
- + **NEU Intuitiver Farb-Touchscreen**
Benutzerfreundlich: schnelle, sichere und einfache Bedienung
- + **NEU Ergonomie auf hohem Niveau**
Hygienisches Öffnen mit einer einzigen Berührung des Fußsensors
- + **Zukunftsweisende Rauntrennung**
Intelligente Unrein-/Reinraum-Trennung ohne Luftzirkulation zwischen dem reinen und dem kontaminierten Bereich
- + **Eindeutige Kontrolle**
Weltweit führende Technologie von Wassenburg: Einzelkanal-Ansteuerung und Kanaltrennung
- + **Optimale Sicherheit**
Unabhängiges Überwachungssystem (IMS – Independent Monitoring System) für eine sichere Überwachung und unabhängige Messung der relevanten Prozessparameter

OPTIMALE KONTROLLE

- + Kanaltrennung
- + Durchfluss- und Druckkontrolle
- + Kanalanschluss-Kontrolle
- + Independent Monitoring System (IMS)

- + Permanente Dichtheits-Kontrolle
- + Blockade-Kontrolle
- + Lückenlose Nachverfolgbarkeit mittels
Process Manager (und Möglichkeit zum Upload zu
Programmen von Krankenhausinformationssystemen)

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Breite x Tiefe x Höhe: 1100 x 790 x 2060 mm (+ 15 mm darüber für verschiedene Anschlussstecker)
Leergewicht ca.: 325 kg
Kammergröße ca.: 6,6 l (pro Seite)

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS


Spannung: 230 V (Frequenz 50 Hz)
Art des elektrischen Anschlusses: Stecker mit Erdungsverbindung
Maximale Stromstärke: 13 A
Maximale Leistungsaufnahme: 3300 W
Durchschnittliche Wärmeübertragung ca.: 400 W pro Kammer

WASSERZU- UND ABLAUF

Min./max. Druck: 2,5/4 Bar (max. Differenz zwischen Heiß- und Kaltwasserzufuhr: 1 Bar)
Minimale Durchflussmenge für Heiß-/Kaltwasserzulauf: 10 l/Min. (Ablaufkapazität: 20 l/Min. pro Abfluss)
Abfluss: Zwei Abflüsse und zwei Überläufe, alle Schläuche werden in einem Abfluss gemeinsam genutzt (Abflussdurchmesser: > DN40)
Abflusshöhe: 350 mm (+/- 5 mm)
Wasserhärte: max. 5°dH oder vollentsalztes Wasser

ABLUFTANLAGE

Kapazität: 70m³/h
Durchmesser: DN 50
Parameter: kondensatfreie Abluft

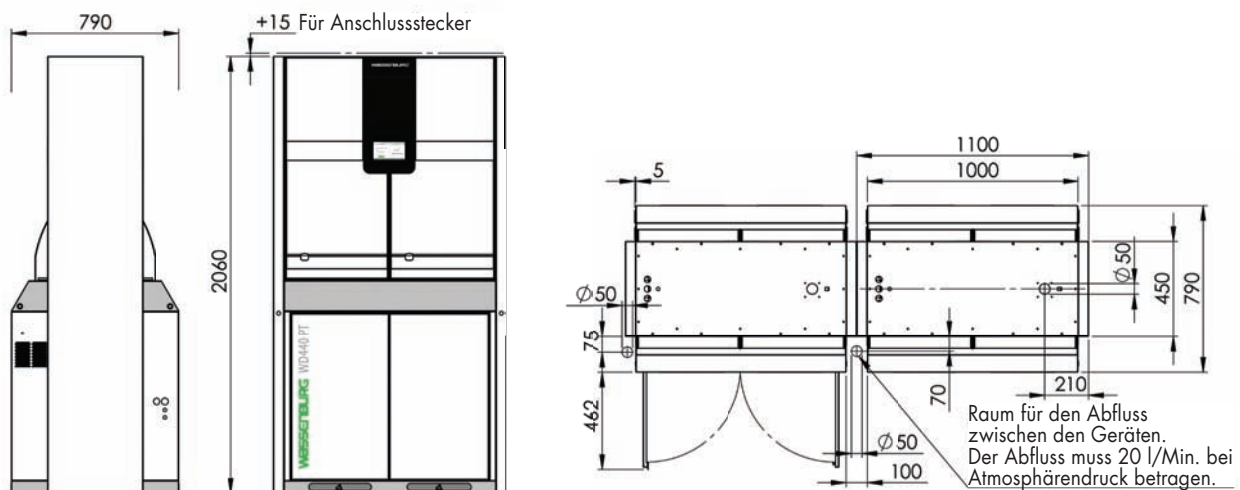

Das Modell WASSENBURG® WD440PT verfügt über das CE-Zeichen und entspricht vollständig EN ISO 15883 Teil 1 und 4.
© Copyright 2016. Änderungen vorbehalten.

Wassenburg Deutschland GmbH
Krefelder Str. 350
41066 Mönchengladbach

Tel.: +49 (0)2161 / 94990-11
Fax: +49 (0)2161 / 94990-33
E-Mail: info@wassenburgmedical.de
www.wassenburgmedical.com