

AquaTYPHOON™

Das vollautomatisierte, bürstenlose Vorreinigungsgerät für Endoskope inkl. Kanäle in nur 2 - 7 Minuten



POWERED BY PENTAX MEDICAL

VORREINIGUNG MIT ZEITERSPARNIS

Das System ist mit Endoskopen aller führenden Hersteller kompatibel und reduziert den Zeitaufwand für die Vorreinigung der Endoskopkanäle erheblich.

DIE VOLLAUTOMATISIERTE VORREINIGUNG DES AquaTYPHOON™ BEINHALTET

- Reinigung erfolgt effektiv für alle Endoskope und aller Kanäle inkl. der nicht zu bürstenden Kanälen
- Wegfall von Einwegbürsten
- Wegfall von Prozesschemikalien (Reiniger)
- Geringer Wasserverbrauch
- Integrierte Dichtheitsprüfung
- AquaBOX bietet optimalen Spritzschutz
- Reduktion von Kosten
- Bedienerfreundliches Handling
- Touchpanel intuitiv und wischdesinfizierbar



SMARTE TECHNOLOGIE ZUR WIRKSAMEN VORREINIGUNG


Bei der AquaTYPHOON™ - Technologie werden ausschließlich Luft und Wasser eingesetzt. In einem vollautomatisierten Prozess zur bürstenlosen Vorreinigung aller Endoskopkanäle – selbst solcher Kanäle, die nicht bürstengängig sind.



Der AquaTYPHOON führt Wasser pulsierend in die stark verwirbelte medizinische Luft ein.



Im Endoskopkanal erzeugt die turbulente Zwei-Phasen-Strömung starke Scherkräfte, die Rückstände von der Kanalwand lösen.

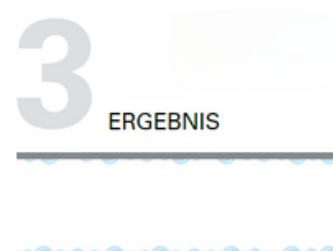

Danach ist der Endoskopkanal frei von Rückständen.

AquaTYPHOON™

Effizient und zuverlässig

AquaTYPHOON™ zur schnellen
Vorreinigung der Kanäle

Barcode-Scanner

RFID-Scanner

Aqua-JET

Label-Drucker zur
lückenlosen Rückverfolgung



POWERED BY PENTAX MEDICAL

ENDOSKOPTYP	ZEIT FÜR AUTOM. VORREINIGUNG
EBUS, Bronchoskope, Nasolaryngoskope, Zystoskope, Ureterskope	2 min
Gastrointestinale (GI) Endoskope	5 min
EUS Endoskope, Zwei-Kanal-GI-Endoskope	7 min



Wiederaufbereitungskosten senken durch Verringerung des Arbeitsaufwandes, des Wasserverbrauchs und des Bedarfs an Einweg-Verbrauchsmaterial und Reinigungsmitteln.



Vereinfacht die Wiederaufbereitung von flexiblen Endoskopen aller namhaften Hersteller.



Endoskope sind schneller wieder einsatzbereit. So können mehr Behandlungen durchgeführt werden, was die Effizienz und Produktivität des Krankenhauses und der niedergelassenen Praxis steigert.

SPEZIFIKATIONEN AquaTYPHOON™

PARAMETER	WERTE
Stromversorgung/elektrisches Netz	100-240 V
Maße (LxBxH)	300x280x260 mm
Netzfrequenz	50/60 Hz
Maximale Stromaufnahme	100 W
Nettogewicht	10,7kg
Minimaler Druck am Lufteinlass	3 bar
Minimale Gasdurchflussrate	70l/min
Minimaler Druck am Wassereinlass	3 bar

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte: IEC 61010-1: 2017 - IEC 61326-1: 2021
EN ISO 15883-4: 2018 - EN ISO 15883-5: 2021 - EN ISO 15223-1: 2021

AquaTYPHOON™ ist mit allen gängigen Endoskop - Herstellern kompatibel.

Wassenburg Deutschland GmbH · Krefelder Str. 350 · 41066 Mönchengladbach
info@wassenburgmedical.de · T +49 (0)2161-94990-11

Hersteller: PlasmaBiotics SAS - 116 Quai de Bezons, 95100 Argenteuil, Frankreich

Medizinprodukt der Klasse I. Dieses Produkt darf nur von medizinischem Fachpersonal benutzt werden. Bitte lesen Sie vor Anwendung die Gebrauchsanweisung; dort finden Sie auch ausführliche Produktspezifikationen. Technische Änderungen bleiben vorbehalten. AquaTYPHOON™ ist eine eingetragene Marke von PlasmaBiotics SA.