


Spécialistes dans le retraitement d'endoscopes depuis plus de 35 ans!

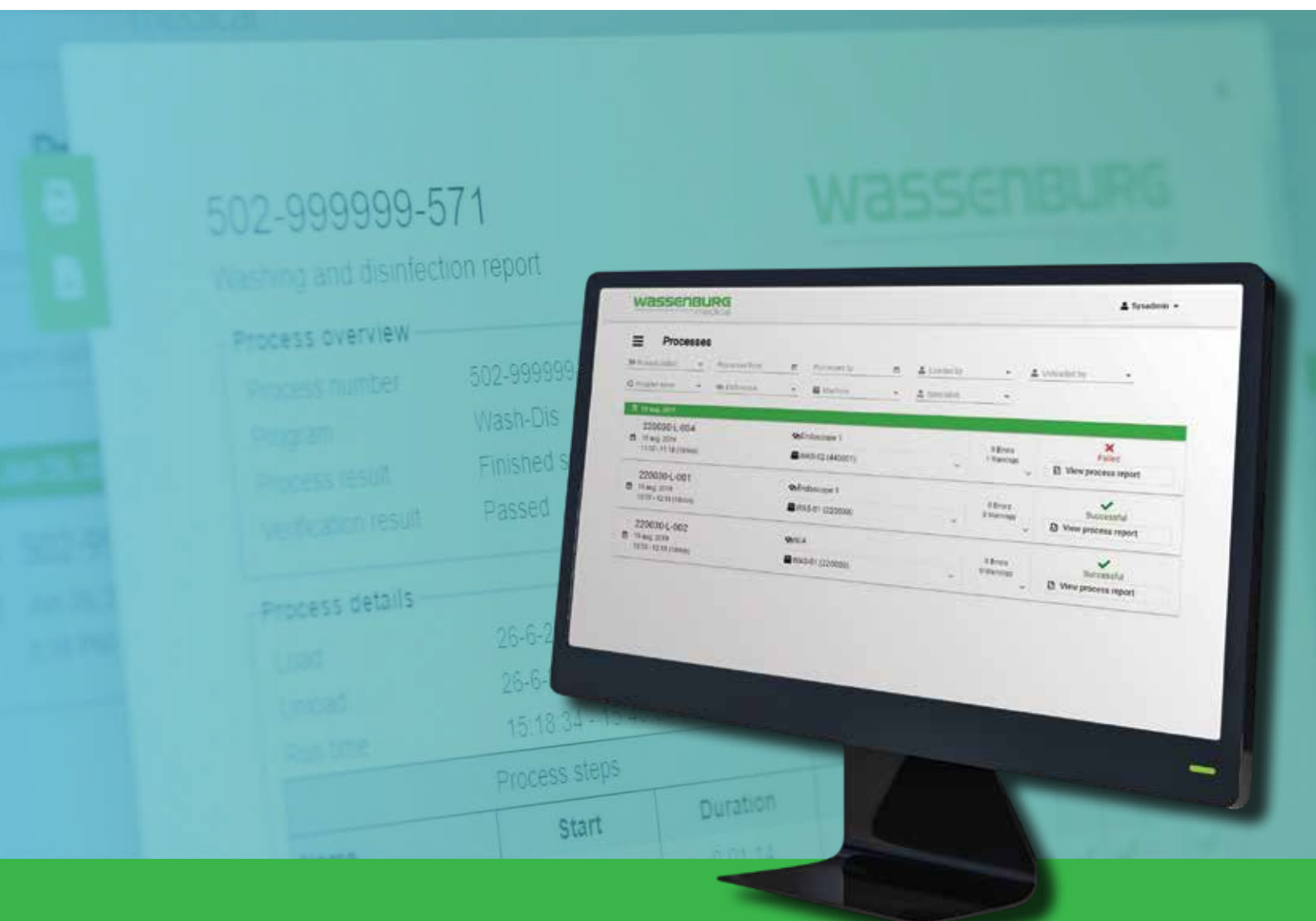


WASSENBURG® Process Reporter

Les données de cycles en temps réel à portée de main.

UN ENDOSCOPE SÛR POUR CHAQUE PATIENT

Wassenburg Medical est un leader dans le retraitement des endoscopes. Depuis plus de 35 ans, nous développons des solutions innovantes avec pour seul objectif de fournir un endoscope sûr à chaque patient. Le résultat est une gamme de produits et de solutions qui couvrent le spectre complet du retraitement des endoscopes: une solution intégrale.

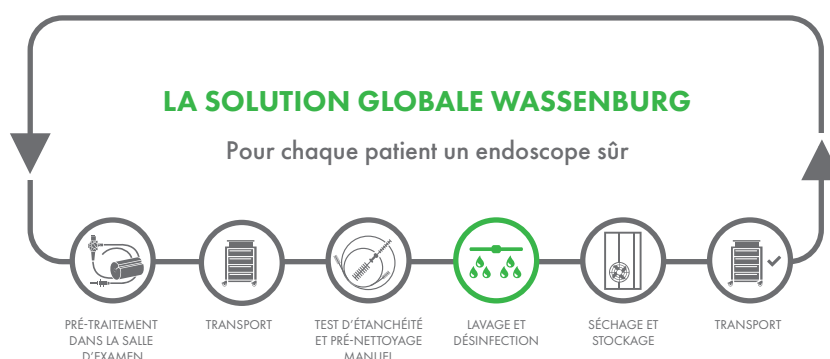

WASSENBURG® PROCESS REPORTER

La traçabilité est un outil clé dans l'organisation et le contrôle du processus de retraitement des endoscopes et un élément indispensable de la conformité réglementaire. Grâce au système WASSENBURG® Process Reporter, toutes les étapes de lavage et de désinfection dans le WASSENBURG® WD4200 sont tracées et monitorées en détail.

Notre logiciel d'enregistrement et de traçabilité fournit un aperçu complet de toutes les informations pertinentes en support à la traçabilité, comprenant l'information au sujet de l'endoscope, de l'utilisateur de l'équipement ainsi que du spécialiste.

WASSENBURG® Process Reporter rassemble et enregistre en temps réel les données collectées lors du lavage et de la désinfection des endoscopes dans le WASSENBURG® WD4200. Process Reporter offre une vue centralisée des données internes relatives aux opérations journalières effectuées par le laveur-désinfecteur.

LES DONNÉES DE CYCLES À PORTÉE DE MAIN

WASSENBURG® Process Reporter est fonctionnel dès qu'il est installé sur le serveur de l'hôpital et relié à un laveur-désinfecteur d'endoscopes WASSENBURG® WD4200. Toutes les données sont alors à portée de main. Les utilisateurs autorisés ainsi que les techniciens peuvent consulter l'état du ou des processus actifs et gérer les données des cycles effectués à tout moment et cela à partir de n'importe quel PC muni de Web Client et connecté au serveur de l'hôpital.

Veuillez contacter votre représentant Wassenburg pour de plus amples informations concernant l'installation du WASSENBURG® Process Reporter.